




PRESENTA
IL TRATTAMENTO CON RADIOFREQUENZA
PER CONTRASTARE IL NATURALE INVECCHIAMENTO CUTANEO




Touch screen intuitivo con trattamenti preimpostati e personalizzabili.

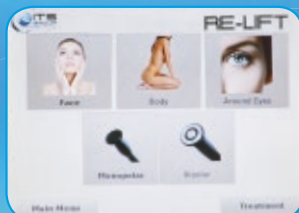

Trattamento confortevole



Manualità semplici e pratiche

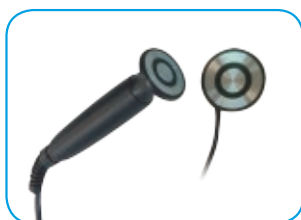

MODALITA' BIPOLARE per un effetto levigante immediato.



Monitoraggio continuo del trattamento



Modalità monopolare per trattare il derma profondo con due differenti frequenze, viso e corpo.




8 Diverse misure di elettrodi per personalizzare il trattamento in base alla zona.

RE-LIFT

RADIOFREQUENZA

AZIONI:

- Tonificante cutaneo
- Drenante

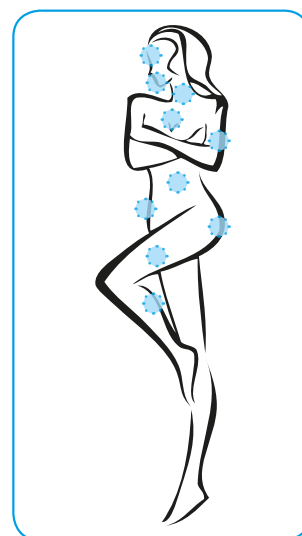

Categoria: CORPO E VISO

MADE IN ITALY



RE-LIFT

RADIOFREQUENZA

LA TECNOLOGIA:

LA TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE nella combinazione di modalità monopolare e bipolare, sfrutta il trasferimento energetico all'interno del corpo umano tramite una corrente di bassa intensità e dalla frequenza variabile.

Provoca ionizzazione delle molecole tissutali e gli atomi che si liberano, urtandosi fra di loro, si trasmettono reciprocamente il movimento provocando onde acustiche registrabili (fononi).

Una parte dell'energia liberata da questo processo viene trasformata in energia vibratoria e, quindi, in calore con cui si induce una biostimolazione attiva sia a livello cellulare, sia della matrice, con effetto rigeneratore delle funzioni.

Viene influenzato il tono vasale del letto capillare tramite il rilascio di neurotrasmettitori da parte del simpatico che agiscono sulla muscolatura liscia della tunica media. La vasodilatazione, poi, comporta un maggiore afflusso di ossigeno e nutrienti per i tessuti.

Effetti attendibili:

- Aumento vascolarizzazione
- Aumento del flusso venoso e linfatico
- Sintesi di fattori di attivazione fibroblastica ad opera di macrofagi e neutrofili
- Neocollagenesi
- Aumento spessore derma
- Aumento spessore papille dermiche

CONTROINDICAZIONI:



- Impianti siliconati
- Implantologia e protesi metalliche
- Pace maker e apparecchi elettronici in genere

INFORMAZIONI:





- Percorso consigliato : 3/15 sedute
- Intervallo massimo tra le sedute : 7/30 gg
- Tempo seduta: 20/60 min

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello:	RE-LIFT
Alimentazione:	110 – 240V; 50-60Hz
Potenza Max assorbita:	200W
Tecnologia:	Monopolare, bipolare
Frequenza:	500 - 800 kHz
Potenza erogata:	Bipolare max 25W; monopolare max 50W
Dimensioni manipoli:	bipolare ø 30 mm; monopolari ø 25mm, 35mm, 50mm, 70mm
Classificazione IEC 60601-1	Classe I, tipo B
Display:	Touch Screen
Peso:	12 kg
Dimensioni:	L 450x P550 x H350 mm
Condizioni di esercizio:	Temperatura: 15°C - 35°C, umidità 30% - 60%, pressione 86kPa -106kPa
Condizioni di conservazione e trasporto:	Temperatura: 5°C- 45°C, umidità 30% - 70%, pressione 86kPa -106kPa

Ringiovanimento progressivo

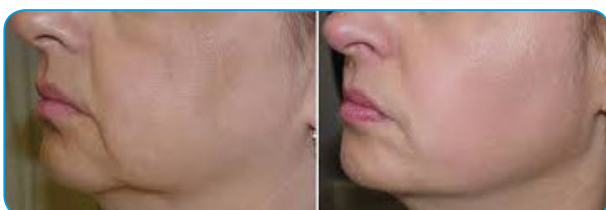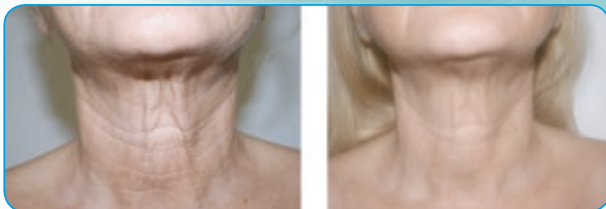

Via Del Cerchio 1 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel. (039) 051 6467153 - Fax: (039) 051 0822612
info@itsgroupsrl.com - www.itsgroupsrl.com



Rev. 17.07